

⚠ 安全に関するご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●乳幼児や12歳以下のお子様、末梢神経に知覚障害のある方、妊娠中の方は、ご使用しないでください。
その他のご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用中に気分が悪くなったり、異常を感じたりした場合は、すぐに使用を中止してください。 ●お身体の不自由な方は、介助なしでは使用しないでください。 ●医師の治療を受けている方は、使用前に医師と相談してください。
長年ご使用の機器の点検について	<ul style="list-style-type: none"> ●次の症状がある場合は、代理店にご相談ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・コードを動かすと通電しない ・コードやプラグが異常に熱くなる。 ・こげくさい臭いがする ・その他、異常や故障がある

製品仕様

製 品 名	アーチスタイル・SUN スリムビーナス
型 式	YD-101
定 格	AC100V 800W 最大 800W 最少 80W
特定電気用品の表示	電気サウナバス
適 合 検 査	JET
出 力 調 整 器	位相性制御による無段階電圧調整
タ イ マ ー	初期設定 温度60℃ タイマー60分
ヒ ュ ー ズ	100V 10A管入りヒューズ
遠赤外線照射ヒーター	大アーチ 200W×2 小アーチ 175W×2 50W×1
安 全 装 置	各ヒーターに100℃過昇防止温度ヒューズ サーモプロテクター
電 源 コ ー ド	電力コード 2.8m 10Aキャプタイヤコード 出力コード 2.3m 7Aキャプタイヤコード
サ イ ズ	幅72×高さ46×長さ91 (cm) : 大アーチ 幅62×高さ41×長さ91 (cm) : 小アーチ
収 納 時	幅72×奥行46×長さ91 (cm)
重 量	大アーチ 9Kg 小アーチ 10Kg コントローラーボックス 2Kg
総 重 量	27kg 梱包ダンボール付属品共
ダンボールサイズ	幅75×高さ95×奥行51 (cm)
付 属 品	スポンジレザー長枕、ネックカバー、反射敷マット
反 射 敷 マ ッ ト	幅78×長さ190×厚さ2 (cm)
本 体 構 造	木材・合板・ウレタン発泡断熱材・塩ビレザー

※製品改良の為、仕様を予告なく変更する場合があります。

製品価格

--

総発売元

株式会社 YUNOHANA

〒111-0042 東京都台東区寿2-9-1 ウッドトイズビル4F
TEL 03-6231-6081 FAX 03-6231-6082

PREMIUM ARCH
プレミアムアーチ誕生!

Birth of Venus



アーチスタイル SUN

スリム ビーナス Slim Venus



株式会社 YUNOHANA

 スリム ビーナス
Slim Venus®

ビーナス効果

温活

体温を1℃アップ
身体の中から健康
で美しく！

安眠効果

休息のリズムへの
自然な転換がはかれ、
快適に眠れます。

美肌効果

みずみずしい健や
かなお肌になりま
す。

電磁波をカット

発生する電磁波を90%以上カットする
新型面状ヒーターを使用しています。

お肌を守るメッシュガード

内側は、遠赤外線を遮らずにお肌の安全
をしっかりガードするメッシュ加工です。

指1本でらくらくスライド

湯の花シートDX(デラックス)

湯の花パウダーと遠赤パウダー配合の
スーパーシートでさらにパワーアップ！

リラックス効果

温熱効果により全
身がリラックスし
ます。

衛生的な抗菌加工

本体は、抗菌加工済みのレザーを使用
山路を登りなおります。



**抗菌
加工**

疲労回復

代謝産物を分泌し、
エネルギーを再生産
するので疲労回復の
効果が上がります

シェイプアップ

脂肪を燃焼させて、
痩せやすい身体を
作り、理想の体型
に近づけます。

健康美の維持

健康美の増進と維
持にお役立てくだ
さい。

ストレス解消

発汗でスッキリ！
ストレスの解消に
効果的です。

運動不足解消

遠赤外線効果で皮脂
腺から発汗します。
(運動時と同じ発汗)

コリと痛みに

血行が促進されて
肩こり腰痛などが
緩和されます。

**簡単操作で最適温度に！
コントロールボックス**

大・小アーチの赤外線ヒーターは、
それぞれ好みの温度と時間に
設定できます。

3つ折りタイプの敷マット

敷マットは、3つに折って
コンパクトに収納できます。



コントロールボックス

特許
取得

特許ヒーターの優れた機能のご紹介

特許 3584231 号

温度が均一の特許ヒーター

アーチ左右両側の発熱量を多くして温度を高くし、アーチ天井部に向かい徐々に発熱量を少なくし、更に天頂部の発熱量を最も少なくして温度を低くすると、左右下部はアーチ内の空気の対流で冷やされ、天頂部は、熱せられた空気温度が上がり、アーチ内の面ヒーター全面が同一温度になります。従来の面ヒーターは、全面が均一に発熱するので、左右下部の温度が低く、天頂部では高くなり、10℃～15℃度の温度差ができる欠点がありました。ヒーター全面がほぼ同一温度になるので、サーモスタットによる温度制御が良好になります。

特許取得・新型面ヒーター

ヒーターに裏表がある



従来型面ヒーター (カーボンヒーター)

ヒーターに表・裏が無い



短時間で実用温度に

遠赤外線放射線物質 (セラミック・カーボンブラック・トルマリン・天然鉱石等) を焼き付けした熱伝導率の良いアルミ合金にヒーターを特殊形状で組み合わせた専用の特許ヒーターなので、素早く温度が上昇し、短時間で実用温度になり、遠赤外線を放射します。

アーチの外側が熱くならない

ヒーターに表・裏がありますので、アーチの外側への熱ロスが少なく、従来型のように外装レザーが熱くなることはありません。アーチ内を効率よくあたためる省エネタイプのヒーターです。

耐久性アップ

従来型カーボンヒーターは経年劣化しましたが、特許ヒーターは半永久的にヒーター出力が低下しませんので、末長くご愛用いただけます。


特許ヒーターはメッシュでガード

耐熱素材の (ポリエステル繊維) メッシュでヒーターの放射面を全面的に覆い、両端を折り返して裏面で固定します。メッシュはヒーターの放射面に固着されず、わずかに離れて浮いた状態でセットされるので、温度が低くガードとしての効果が大きくなります。さらに、メッシュの細かい網目は、遠赤外線の照射をさえぎる率が少なく、照射効果を高めます。

特許ヒーターのメッシュ




従来ヒーターの不織布

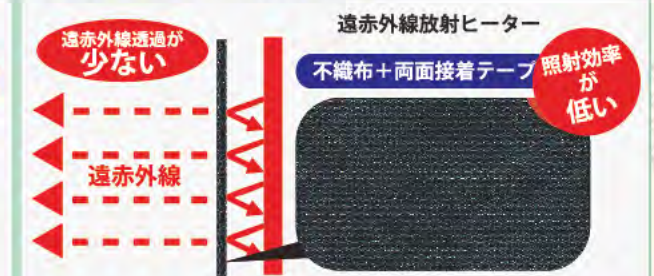

アーチ内から放射される 《遠赤外線》の秘密

遠赤外線の中の育成光線 (4～14 ミクロン) よりもさらに浸透性・安全性の高い育成光線の 7～12 ミクロンの波長を実現しました。

育成光線の波長は、皮膚によく吸収されて深部まで浸透し、細胞を共振させて身体を芯から温め、血行や新陳代謝を促進して免疫力を高めるといわれています。

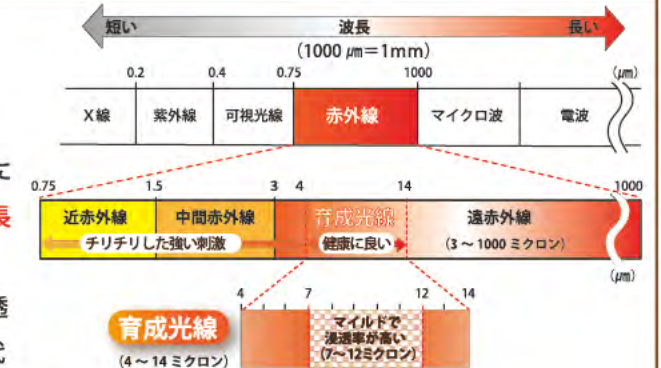

アーチから放射される
遠赤外線はこの部分!

「遠赤浴」で毎日イキイキ! 健康を守るリフレッシュ効果



お風呂や温泉、蒸気風呂 (フィンランドサウナ)、砂風呂、熱気浴 (100℃以上) など、あらゆる入浴方式は、身体をあたため、発汗を促し、疲れをとって、気分を爽快にするリフレッシュ効果があります。身体を芯からあたためる遠赤外線浴と、体内の老廃物や疲労物質を体外に放出する発汗浴の両方の効果が得られるのが遠赤浴です。その遠赤浴を手軽に楽しめるのが「スリムビーナス®」です。健康増進、病気予防、リハビリ回復にぜひお役立て下さい。

湯の花シートDX(デラックス)

PREMIUM ARCH

プレミアム理由は…

プレミアムアーチ誕生!

湯の花パウダー
遠赤パウダー 配合
湯の花シートDX



湯の花パウダー ホルミシス効果

☆湯の花パウダーのふるさと玉川温泉☆
十和田湖八幡平国立公園の秋田側に位置し一日に数千人の湯治客が訪れる秋田の秘湯「玉川温泉」。その効能の秘密は、放射性ラジウムを含む北投石にあります。北投石は国の特別天然記念物であり、採取は不可能です。しかし、その組成、生成の過程を調べると、北投石は、玉川温泉の湯の花が堆積したものであり、測定の結果、採取可能な湯の花も北投石と同等レベルでラジウムを放射していることがわかりました。ラジウム系(ラドン・トロン)鉱石を使用した温泉は、神経痛や冷え症の緩和、体質改善に優れた効果を感じる方が多いようです。それが「放射線ホルミシス効果」です。
玉川温泉の湯の花から不純物を取り除き、北投石を約95%まで再現した人工北投石を精製してパウダーにしたものが「湯の花パウダー」です。



玉川温泉



湯の花を採取する湯川



採取した湯の花




湯の花を精製した湯の花パウダー



湯の花シートDX(デラックス)をガイガーカウンター(放射線検知器)で計測:単位(μSv/h)

遠赤パウダー 遠赤効果

遠赤外線は熱線とも言われ、ものを内側から温めるという特性を持っていますので、皮膚内の深部まで人体をマイルドに温め、心臓に負担をかけることなく毛細血管を拡張することで血液の循環が促進されます。さらに細胞の新陳代謝、組織再生能力の促進、機能活性化、など人間が本来もっている自然治癒力を高める作用があります。

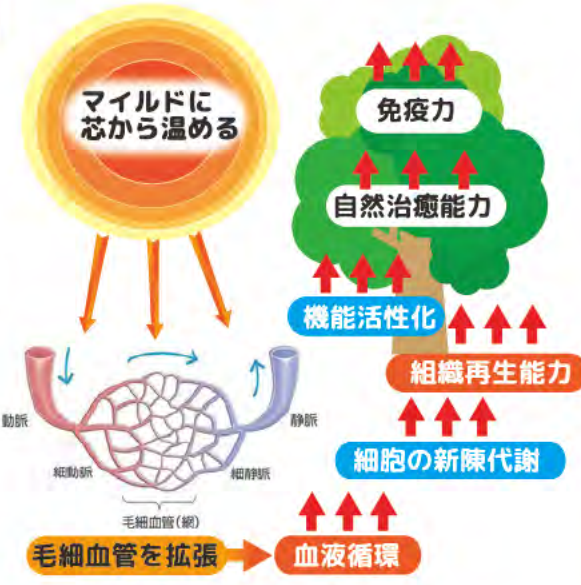


特許取得


指一本でらくらくスライド

特許 3894552 号

小アーチの左右の板がレールのようになって大アーチのスライドがとても軽くスムーズです!

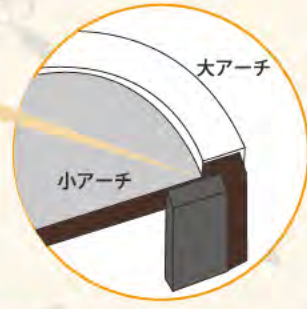

従来のドームサウナは小アーチに大アーチを乗せるだけの構造なので、大アーチのスライドには力が必要でした。そこで当社は、簡単で確実なスライド構造を開発し、特許が認められました。
簡単でスムーズなスライドとコンパクトな収納は当社の特許構造です。

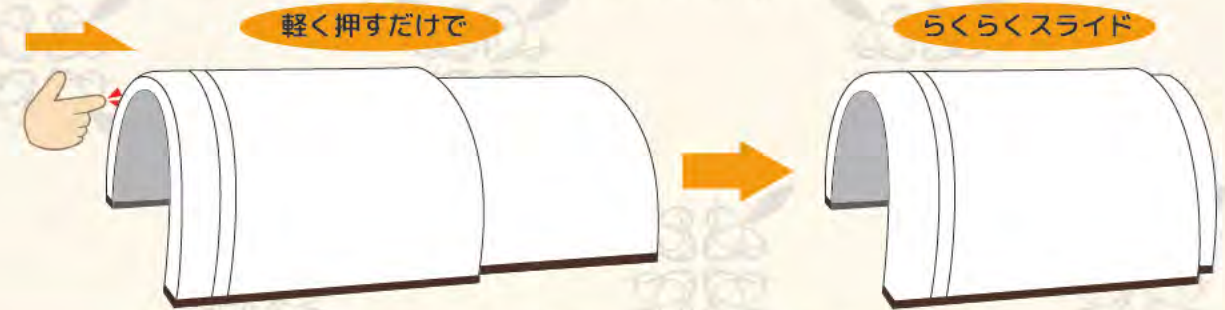

遠赤サウナ浴ビーナスQ&A

- Q** 「スリム ビーナス®」と他の遠赤浴商品との違いはありますか?
- A** 以下の4つの点に違いがあります!
- ①遠赤外線パウダー・マイナスイオンパウダー・ラジウムパウダー配合のダイヤシートDX(デラックス)により効果がさらにパワーアップ!他社製品にはない特徴のひとつです。
 - ②他製品はアーチの内側の布を接着剤で貼り付けてあるものがほとんどですが、「スリムビーナス®」は、内側がメッシュ加工になっており、遠赤外線を遮ることなく効果が得られます。
 - ③他製品はアーチ内の天頂部と下部の温度差が10℃以上ですが、「スリムビーナス®」は改良を重ねた結果、温度差をなくすことに成功しました。(特許を取得した技法です。)
 - ④大アーチのスライドが指一本でスムーズに行えます。また、収納もコンパクトです。(特許を取得した技法です。)
- Q** 使用する時は服を着た方がいいですか?
- A** 服を着用していても大丈夫です。発汗入浴をする際には、体内の老廃物と共に大量の汗をかくので、服を着用する場合には、汚れてもよい衣服の着用をおすすめします。
- Q** 子供や高齢者が入ってもいいですか?
- A** 大丈夫です!ご家族皆様で、自分に合った温度設定での入浴をお楽しみください。ただし、以下の場合の発汗入浴はおやめください。
・医師から入浴を禁止されている。
・重度の疾患がある。
・捻挫や炎症等の初期(冷却処置中)段階。
・体内にボルト等の金属が留置されている方。
・ペースメーカーをご使用されている方。
・出血されている方。(生理中の方は気分が悪くなれば入浴可能です。)
・飲酒・食事食後や空腹時。
・妊娠中の方
※疾患等のある方は、医師とご相談の上、ご使用下さい。
- Q** 汗が出にくい体質ですが、汗が出ますか?
- A** 発汗入浴中は、免疫力が向上し、基礎代謝・新陳代謝がアップしますので、入浴を繰り返すことで500ml以上の汗が出るようになります。汗が出にくい方は、半身浴でお腹を重点的にあたため、じんわり汗がにじんできた後に肩までドームに入って入浴すると、長時間入浴ができてたくさん汗をかくことができます。
- Q** 一般のサウナみたいに熱くて長時間入ってられないのでは?
- A** 自分に合った温度調節ができるので、長時間の入浴も可能です。ただし、発汗入浴前後は、必ず各200ml以上の水分補給を行ってください。
一般のサウナは身体の表面をあたため、頭まで熱くなるので息苦しく感じることもありますが、遠赤外線ドームは、遠赤外線の力により低温で芯からじっくりあたためるので、熱くて辛いことはありません。また、頭を出して入浴できるので、息苦しくなることもありませんので安心してご入浴いただけます。

